



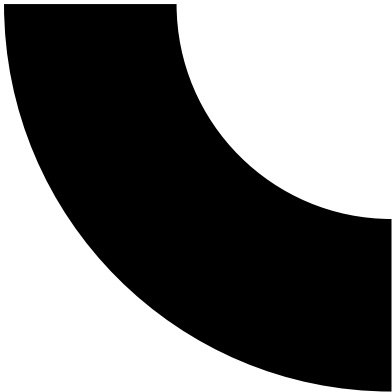

คู่มือ

การใช้งานโปรแกรม

Ear Biometric

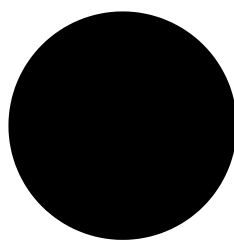

v2.0.0 ●

Table Of contents



Click to jump to the page you need


1	Prerequisite	
2	Tutorial	
	Login	4
	Identify	5
	Registry	11
	Update	16
	Delete	24
	Record	29
	Edit Record	34
	Activity	38
3	Troubleshooting	
	Contact to Developer	36
4	Capturing Instruction	
	Identifying	6
	Updating	17

Prerequisite



prerequisite - ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนใช้

1. เชื่อมต่อกล้อง

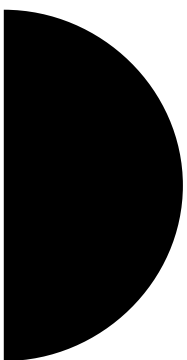

Tutorial

Login

ใส่ username และ password เพื่อเข้าใช้ระบบ

The diagram shows a light blue rounded rectangle representing a login form. Inside the form, the title "Login" is at the top. Below it are two input fields: "Username" with the placeholder text "Enter your username" and "Password" with the placeholder text "Enter your password" and an eye icon. At the bottom of the form is a green button labeled "Confirm" with a right arrow icon. Four labels with blue lines pointing to the form are present: "username" points to the username input field, "password" points to the password input field, "ยืนยัน" (confirm) points to the confirm button, and an unlabeled line points to the form's border.

Tutorial

Identify

ถ่ายใบหูระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Identify

เริ่มระบุตัวตน

เปลี่ยนโหมด

เปิด/ปิดกล้อง

ภาพกล้อง

คำแนะนำในการถ่าย

รีเซ็ต

สถานะ

จับเวลาก่อนถ่ายภาพ

ข้อมูลเด็ก

ข้อมูลผู้ใหญ่

แจ้งเตือน

กรอบสี่เหลี่ยม

กรอบใบหู

Identify Registry Update Delete Record Edit Record Activity

Patient Mode Child Parent

Camera Start Camera Stop Camera

Countdown - 0

Status - Capturing...

Result

Child

hn	
firstname	
lastname	
age	
sex	
nationality	
dob	

Parent

hn	
firstname	
lastname	
age	
sex	
nationality	

Guideline

Distance	Okay
Horizontal	Okay
Vertical	Okay

Capturing...
Capture in 2 seconds

Tutorial

Identify

ถ่ายใบหระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมดผู้ป่วย

Identify Registry Update Delete Record Edit Record

Patient Mode **Child** Parent

Detect Reset

Inside Zone - ☒ Yes
Countdown - 0
Status - Idle

Result

Child

hn
firstname
lastname
age
sex
dob

Parent

hn
firstname
lastname
age
sex
dob

Camera

Start Camera Stop Camera

INSIDE ZONE

โหมด: Child

Identify Registry Update Delete Record Edit Record

Patient Mode Child **Parent**

Detect Reset

Inside Zone - ☒ Yes
Countdown - 3
Status - Capturing...

Result

Child

hn
firstname
lastname
age
sex
dob

Parent

hn
firstname
lastname
age
sex
dob

Camera

Start Camera Stop Camera

INSIDE ZONE


โหมด: Parent

Tutorial

Identify

ถ่ายใบหูระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มระบุตัวตนโดยกดปุ่ม detect

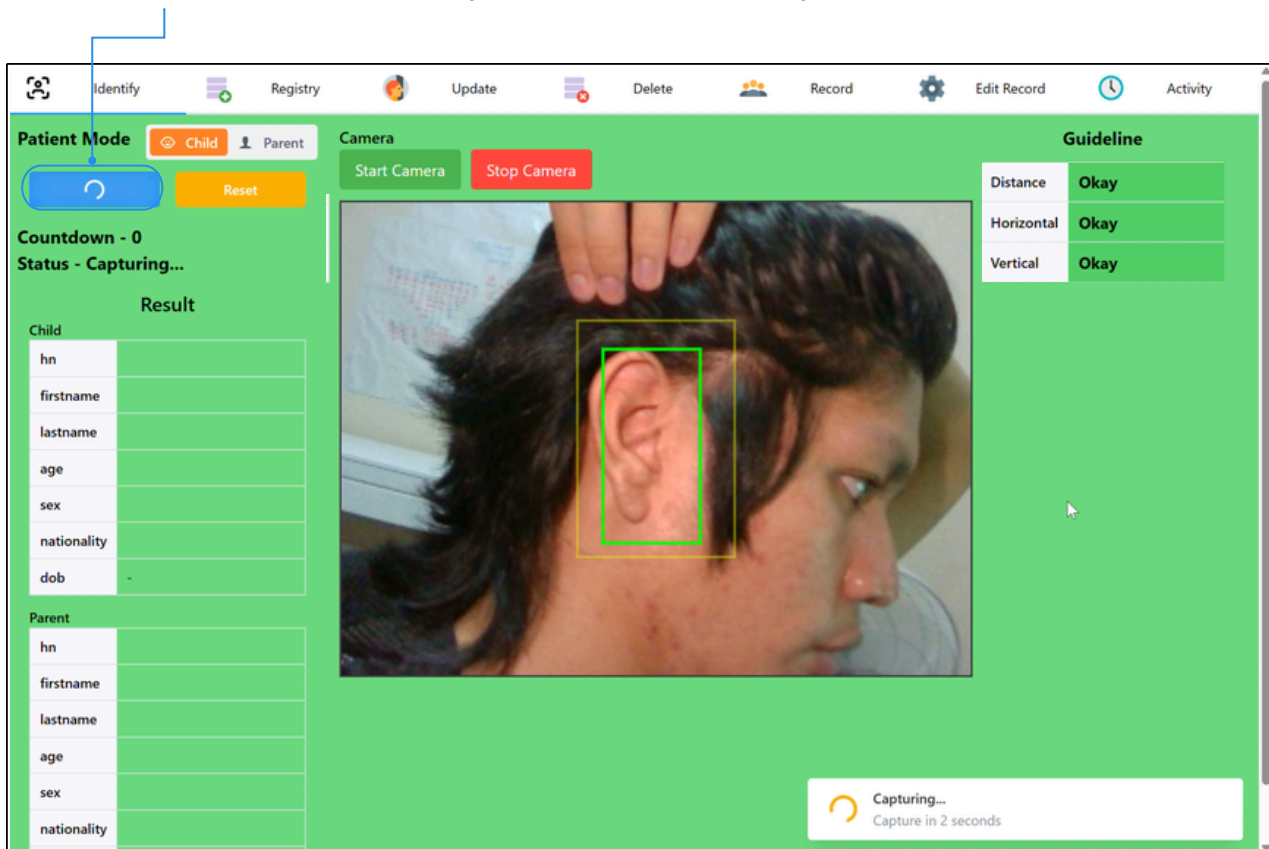


Tutorial

Identify



ถ่ายใบหูระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มระบุตัวตนโดยกดปุ่ม Detect
หลักการถ่ายใบหู

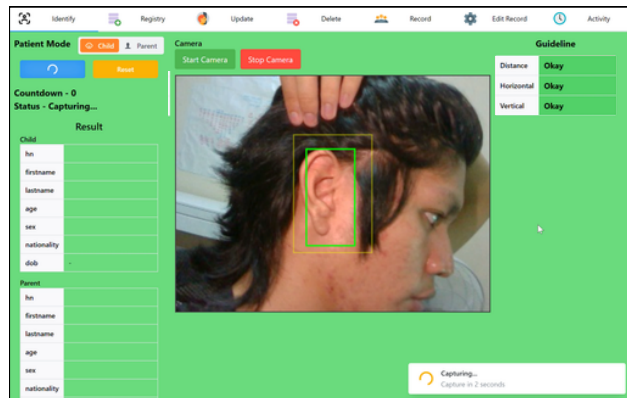


ให้ ใบหู (กรอบสีเขียว) อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านขวามือ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

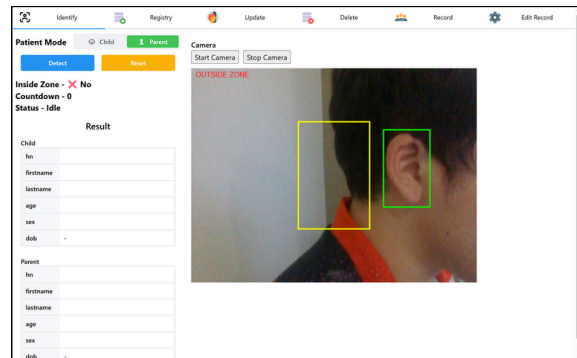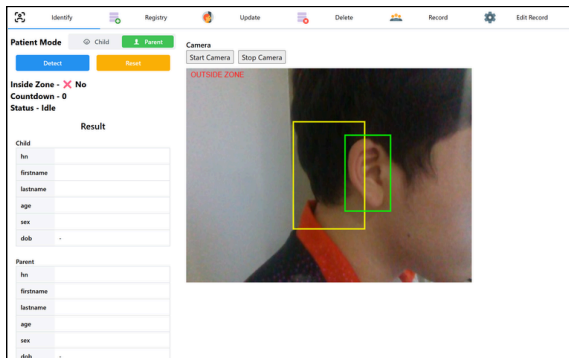

ใบหูอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยม

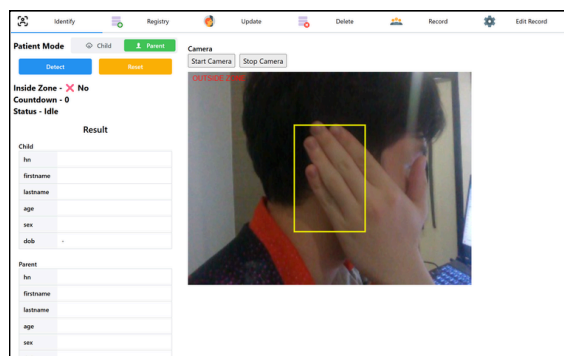


บดบังใบหู

Tutorial


Identify

ถ่ายใบหูระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย


ขั้นตอนที่ 2 เริ่มระบุตัวตนโดยกดปุ่ม Detect
หลักการถ่ายใบหู

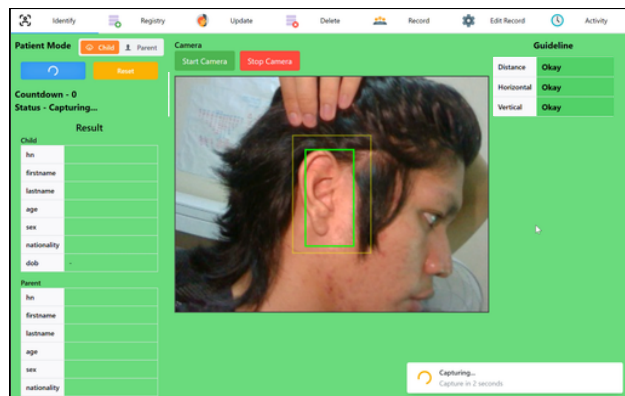


ให้ ใบหู (กรอบสีเขียว) อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านขวาบน
เมื่อไม่สามารถทำตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

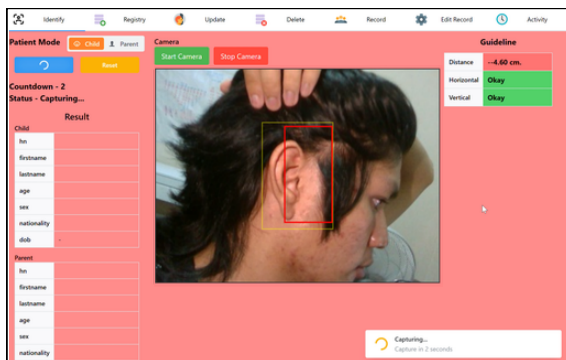

Distance - ใกล้/ไกล เกินไป

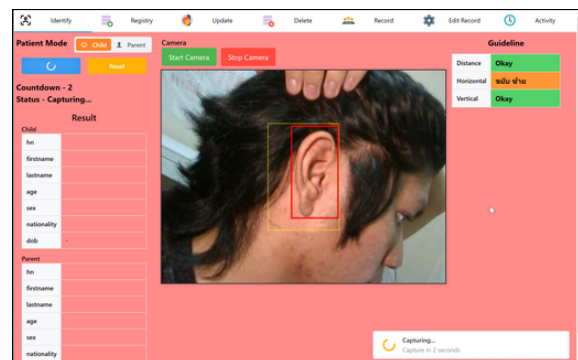

Horizontal - เอียง ซ้าย/ขวา เกินไป

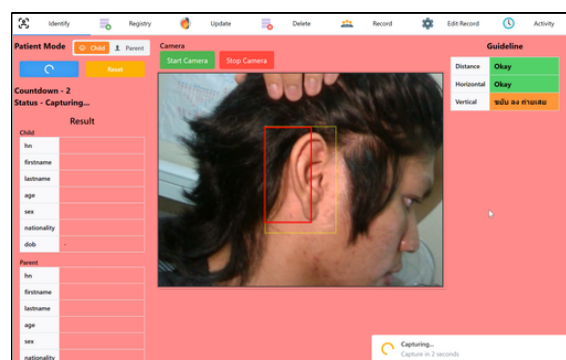


Vertical - กดลง/เสย เกินไป

Tutorial


Identify

ถ่ายใบหูระบุอัตลักษณ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 ดูข้อมูลผู้ป่วยเมื่อ detect สำเร็จ

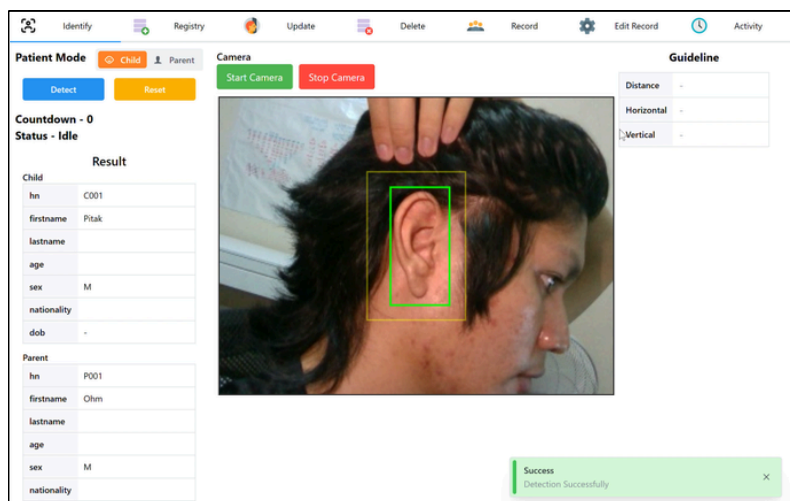

Success: Detection Successfully

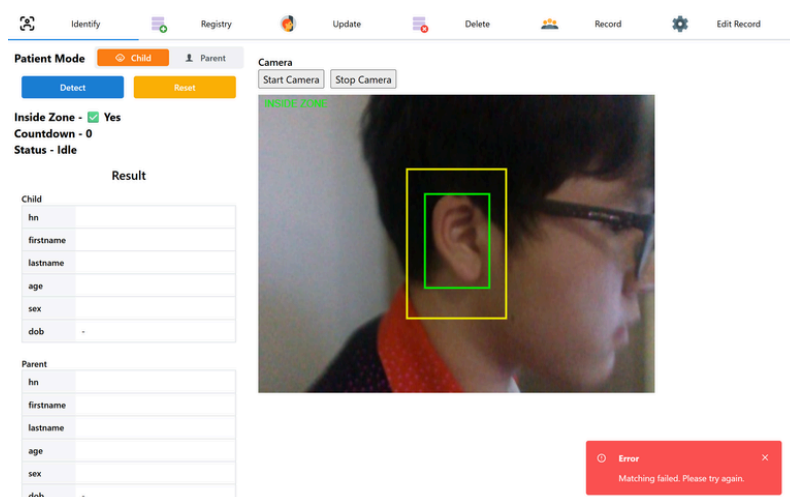

Error ระบุอัตลักษณ์ ไม่ถูกต้อง

Tutorial

Registry

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Registry

The image shows a web-based form for patient registration, titled "Registry". The form is divided into several sections, with a "Record" section highlighted by an orange border. The form includes fields for patient identification, personal details, and medical history. The annotations in Thai provide context for each field:

- หมายเลขโรงพยาบาล** (Hospital Number): Points to the "Hospital Number" field.
- เปลี่ยนโหมด** (Switch Mode): Points to the "Patient Mode" dropdown menu, which is currently set to "Child".
- หมายเลขโรงพยาบาลที่ต้องการเชื่อม** (Hospital Number to be linked): Points to the "Link with Parent's Hospital Number" field.
- ชื่อจริง** (First Name): Points to the "First name" field.
- นามสกุล** (Last Name): Points to the "Last name" field.
- เพศ** (Sex): Points to the "Sex" field, which has radio buttons for "Male" and "Female".
- สัญชาติ** (Nationality): Points to the "Nationality" field.
- อายุ** (Age): Points to the "Age" field.
- วันเกิด** (Date of Birth): Points to the "Date of Birth" field, which uses a date picker.
- ที่อยู่** (Address): Points to the "Address" field.
- น้ำหนักปัจจุบัน** (Current Weight): Points to the "Now Weight (kg)" field.
- ส่วนสูง** (Height): Points to the "Height (cm)" field.
- หมายเหตุ** (Remarks): Points to the "Note" field.
- รายละเอียดการเกิด** (Birth Details): Points to the "Born Detail" field.
- น้ำหนักตอนเกิด** (Weight at Birth): Points to the "Born Weight (kg)" field.
- ความสมบูรณ์** (Integrity): Points to the "Integrity" field.
- ยืนยัน** (Confirm): Points to the "Submit" button.
- ล้างข้อมูล** (Clear Data): Points to the "Reset" button.

Tutorial

Registry

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมดผู้ป่วย

The screenshot shows the 'Record' section of a web application with the 'Patient Mode' set to 'Child'. The 'Child Record' form is highlighted with an orange border. It includes fields for Hospital Number, First name, Last name, Age, Date of Birth, Sex, Nationality, Address, Born Detail, Born Weight (kg), Now Weight (kg), Height (cm), Integrity, and Note. There are 'Reset' and 'Submit' buttons at the bottom.

โหมด: Child

The screenshot shows the 'Record' section of a web application with the 'Patient Mode' set to 'Parent'. The 'Parent Record' form is highlighted with a green border. It includes fields for Hospital Number, First name, Last name, Age, Date of Birth, Sex, Nationality, Address, Born Detail, Born Weight (kg), Now Weight (kg), Height (cm), Integrity, and Note. There are 'Reset' and 'Submit' buttons at the bottom.

โหมด: Parent


Tutorial

Registry


ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล

แบบที่ 1 - ผู้ป่วยใหม่ไม่มีความสัมพันธ์

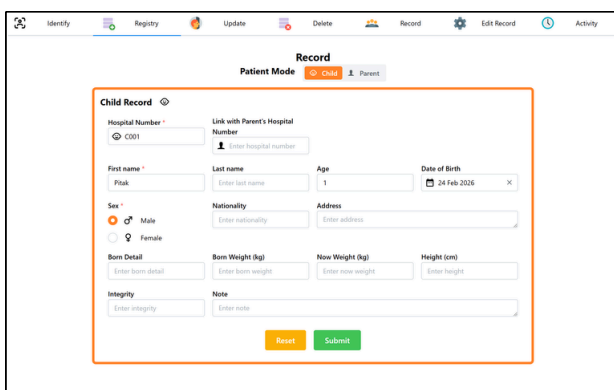


กรอกข้อมูล แบบที่ 1
(* หมายถึง ข้อมูลจำเป็น)

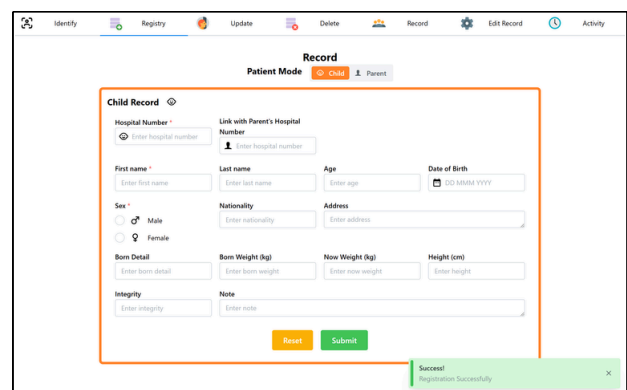


กด 'Submit' เพื่อยืนยัน
ขวาล่าง - แสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

Error

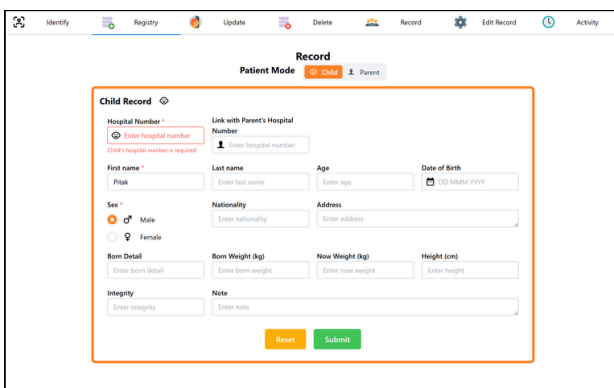

Error: กรอกข้อมูลจำเป็นไม่ครบ

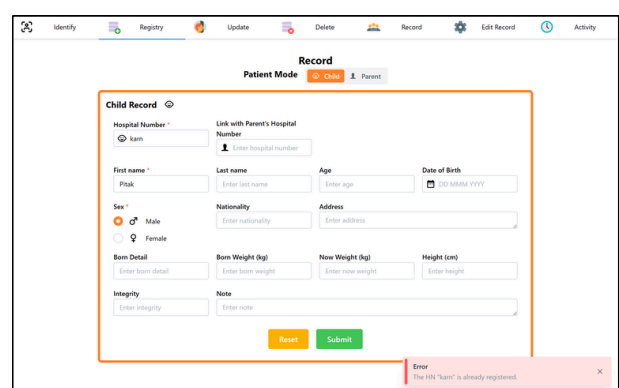

Error: กรอกข้อมูล HN ซ้ำ
ขวาล่าง - แสดง HN ลงทะเบียนซ้ำ

Tutorial

Registry

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล

แบบที่ 2 - ผู้ป่วยใหม่มีความสัมพันธ์ กรอกHN ของChild/Parent ที่เชื่อมกัน

The screenshot shows the 'Record' form in Patient Mode. The 'Child Record' section is highlighted with an orange border. The 'Link with Parent's Hospital Number' field is highlighted with a blue circle. The form includes fields for Hospital Number, First name, Last name, Age, Date of Birth, Sex, Nationality, Address, Born Detail, Born Weight (kg), Now Weight (kg), Height (cm), Integrity, and Note. There are 'Reset' and 'Submit' buttons at the bottom.

กรอกข้อมูล แบบที่ 2
(* หมายถึง ข้อมูลจำเป็น)

The screenshot shows the 'Record' form in Patient Mode. The 'Child Record' section is highlighted with an orange border. The 'Submit' button is highlighted. A green success message is displayed at the bottom right: 'Success! Registration Successfully & Relation Linked'.

กด 'Submit' เพื่อยืนยัน
ขวาล่าง - แสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

Error

The screenshot shows the 'Record' form in Patient Mode. The 'Child Record' section is highlighted with an orange border. The 'Hospital Number' field is highlighted with a red box. A red error message is displayed at the bottom right: 'Error Patient saved, but linking failed: null value in column 'parent_id' of relation 'parent_child' violates not-null constraint'.

Error: กรอกข้อมูลจำเป็นไม่ครบ

The screenshot shows the 'Record' form in Patient Mode. The 'Child Record' section is highlighted with an orange border. The 'Hospital Number' field is highlighted with a red box. A red error message is displayed at the bottom right: 'Error Patient saved, but linking failed: null value in column 'parent_id' of relation 'parent_child' violates not-null constraint'.

Error: ไม่พบ HN ที่ต้องการเชื่อม
แต่ลงทะเบียนได้ โดยไม่มีการเชื่อมHN
ขวาล่าง - ไม่พบ HN ที่เชื่อม

Tutorial

Registry

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล

แบบที่ 3 - เชื่อมความสัมพันธ์ผู้ป่วย ให้กรอกแค่ช่องของ HN ของเด็ก กับ ผู้ใหญ่

Record
Patient Mode **Child** Parent

Child Record

Hospital Number * C001 Link with Parent's Hospital Number P001

First name * Last name Age Date of Birth

Sex * ☐ Male ☐ Female Nationality Address

Born Detail Born Weight (kg) Now Weight (kg) Height (cm)

Integrity Note

Reset Submit

กรอกข้อมูล แบบที่ 3
กรอกเฉพาะ HN 2 เลขที่ต้องการเชื่อม

Record
Patient Mode **Child** Parent

Child Record

Hospital Number * C001 Link with Parent's Hospital Number P001

First name * Last name Age Date of Birth

Sex * ☐ Male ☐ Female Nationality Address

Born Detail Born Weight (kg) Now Weight (kg) Height (cm)

Integrity Note

Reset Submit

Success
Linked Successfully & Relation Linked

กด 'Submit' เพื่อยืนยัน
ขวาล่าง - แสดงการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

Error

Record
Patient Mode **Child** Parent

Child Record

Hospital Number * C001 Link with Parent's Hospital Number P001

First name * Last name Age Date of Birth

Sex * ☐ Male ☐ Female Nationality Address

Born Detail Born Weight (kg) Now Weight (kg) Height (cm)

Integrity Note

Reset Submit

Error: กรอกข้อมูลไม่ครบ

Record
Patient Mode **Child** Parent

Child Record

Hospital Number * C001 Link with Parent's Hospital Number P001

First name * Last name Age Date of Birth

Sex * ☐ Male ☐ Female Nationality Address

Born Detail Born Weight (kg) Now Weight (kg) Height (cm)

Integrity Note

Reset Submit

Error
Patient record, but linking failed: null value in column 'parent_id' of relation 'parent_child' violates not null constraint

Error: ไม่พบ HN ที่ต้องการเชื่อม
ขวาล่าง - ไม่พบ HN ที่เชื่อม

Tutorial

Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

หมายเลขผู้ป่วย


เปลี่ยนโหมด

องค์ประกอบของหน้า Update

เปิด/ปิดกล้อง

ภาพกล้อง

คำแนะนำในการถ่าย

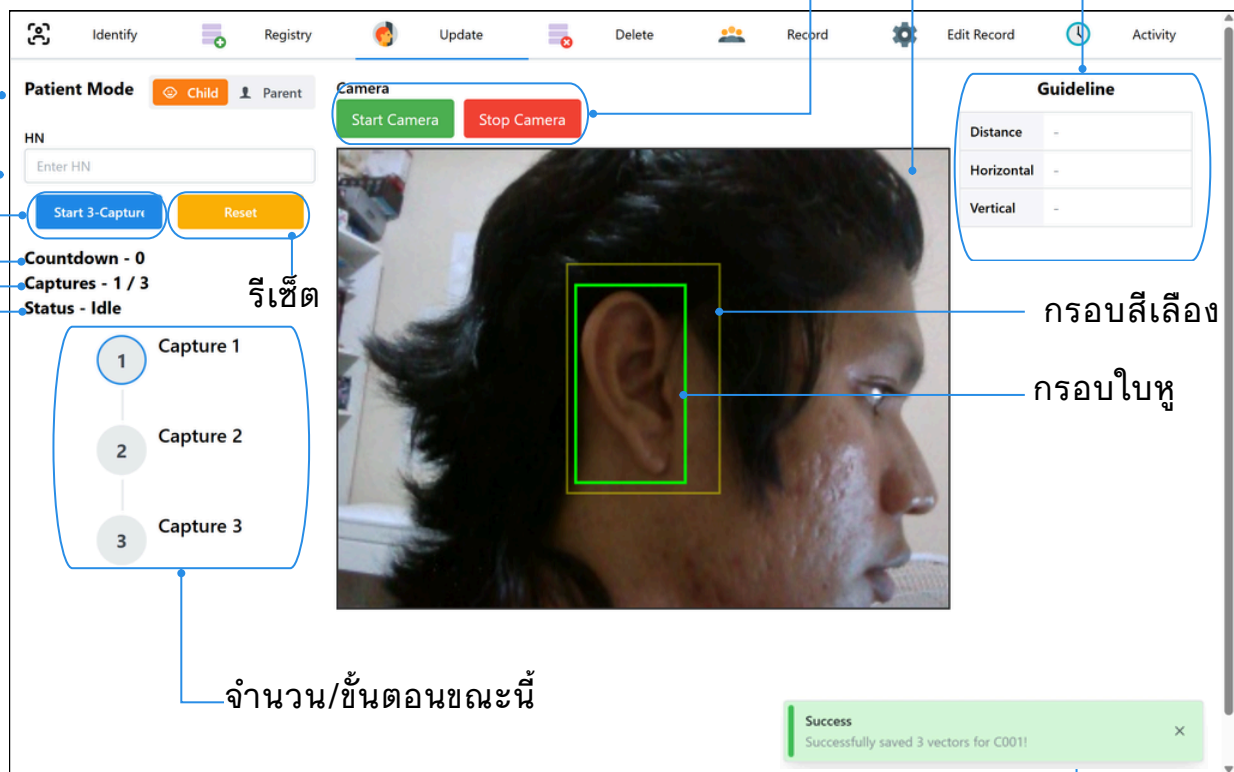

รีเซ็ต

จำนวน/ขั้นตอนขณะนี้

สถานะ

จำนวนภาพที่ถ่ายไปแล้ว

จับเวลาก่อนถ่ายภาพ

เริ่มถ่ายภาพ


แจ้งเตือน

Tutorial

Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมดผู้ป่วย

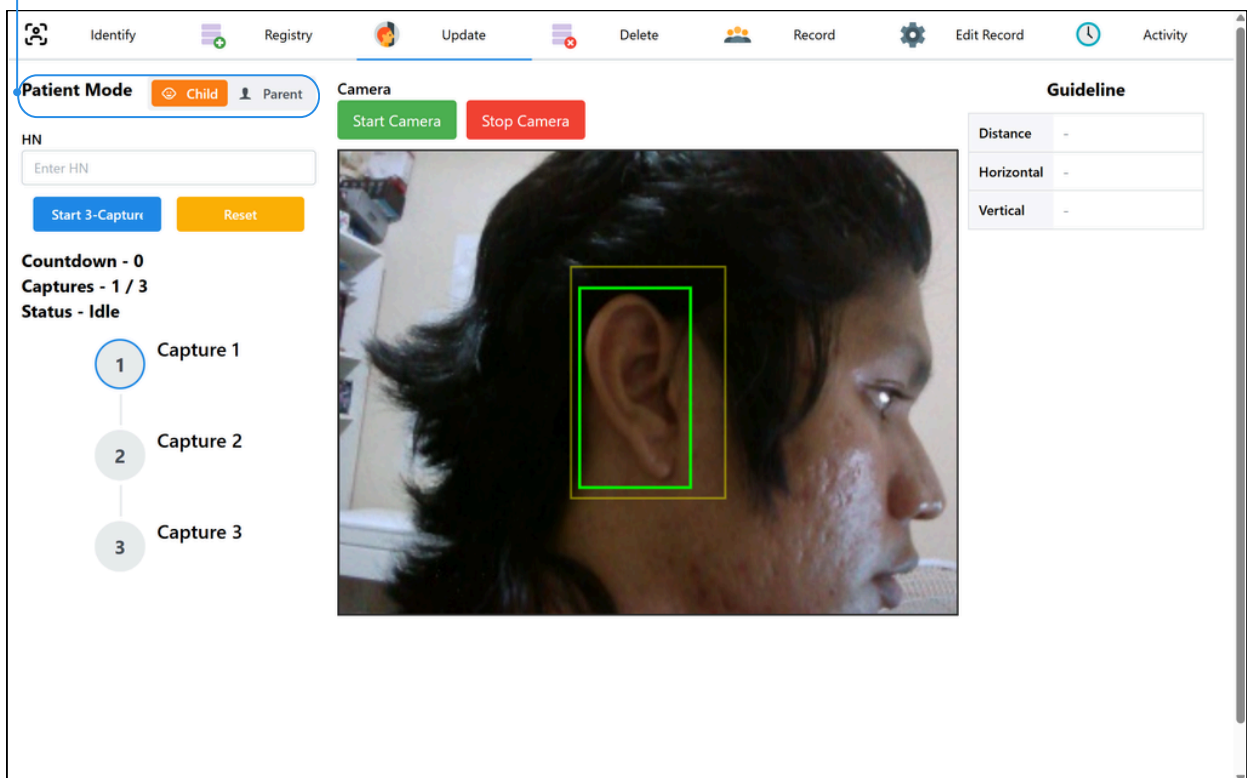


Tutorial

Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรหัสหมายเลขผู้ป่วย

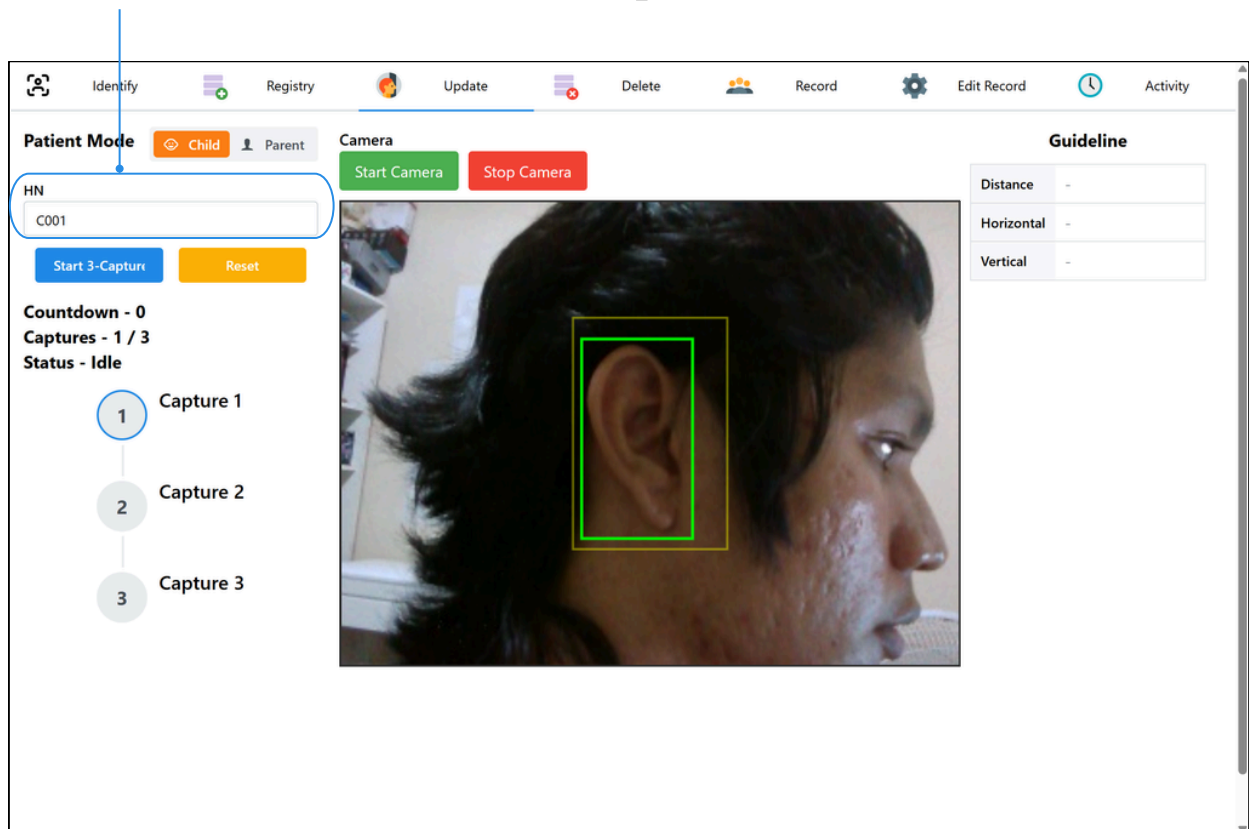


Tutorial


Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Start 3-Capture เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

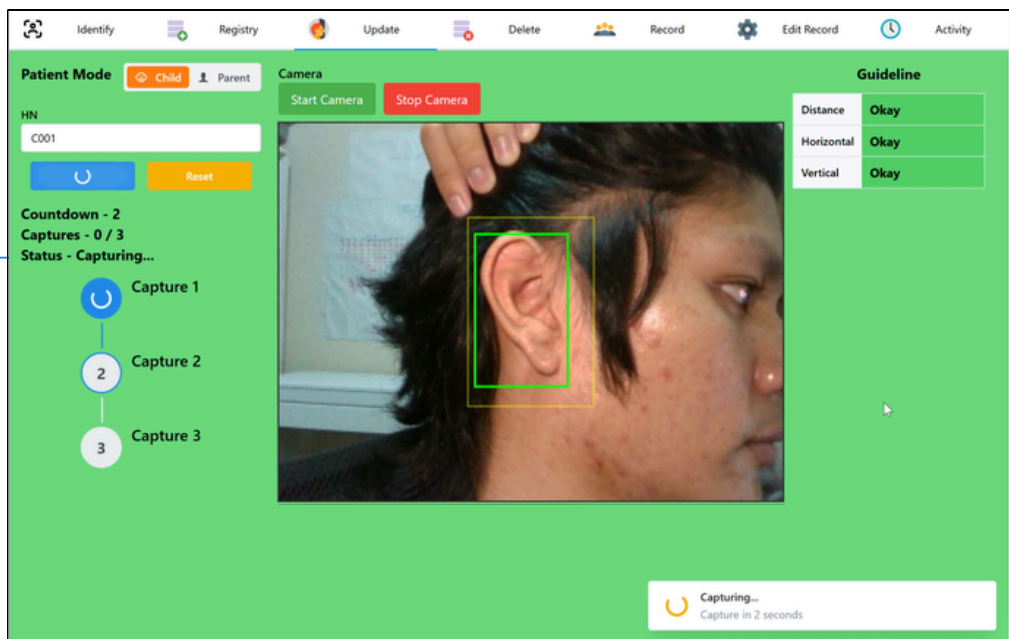

ถ้ากรอกหมายเลขผู้ป่วยแล้ว จะแสดงสถานะเป็น Capturing...

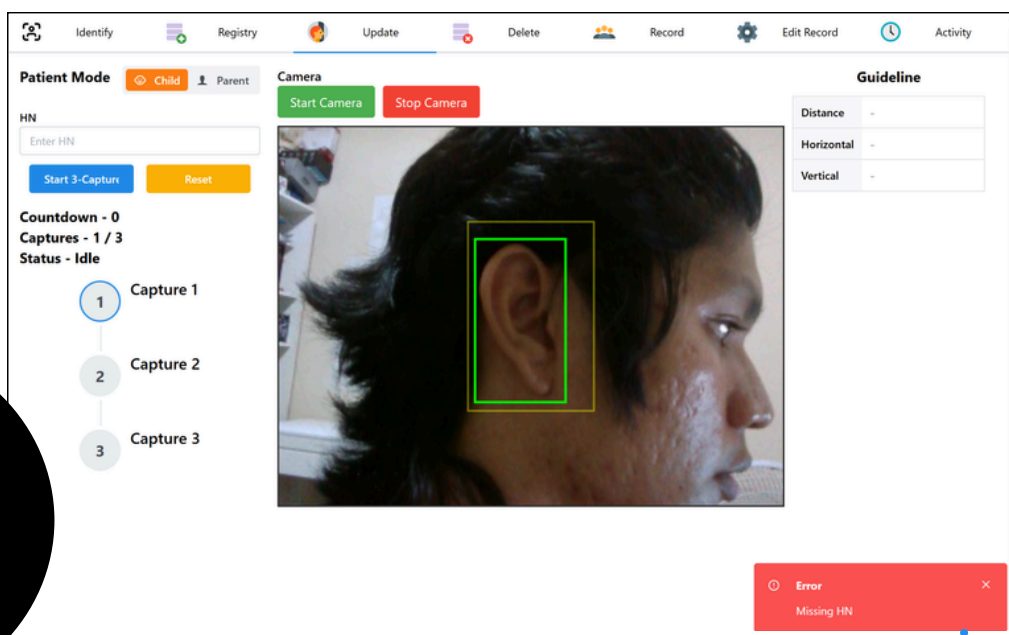


ถ้าไม่ได้กรอกหมายเลขผู้ป่วย จะแสดง Error

Tutorial



Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย



ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Start 3-Capture เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
หลักการถ่ายภาพ

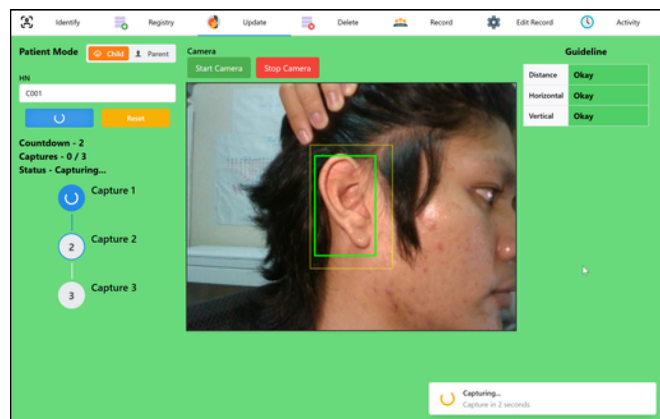

ให้ ใบหู (กรอบสีเขียว) อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านขวาบน
สิ่งที่ไม่ควรทำ

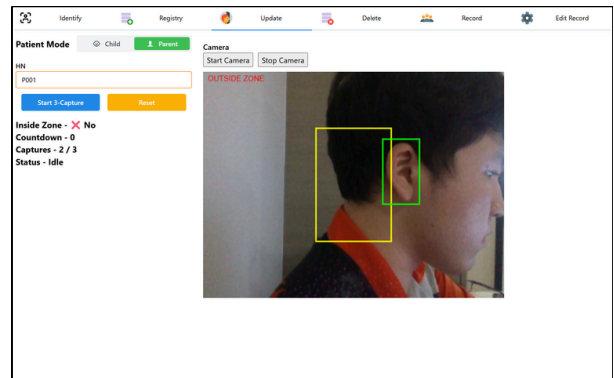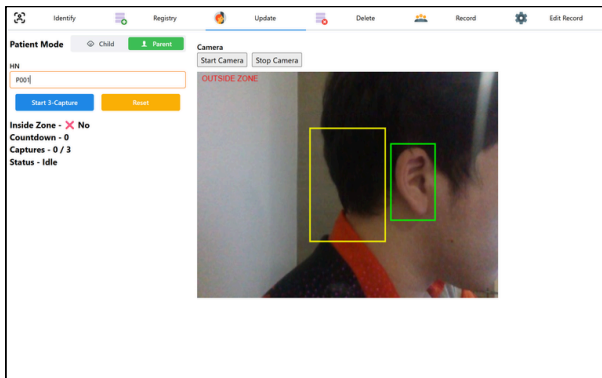

ใบหูอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยม

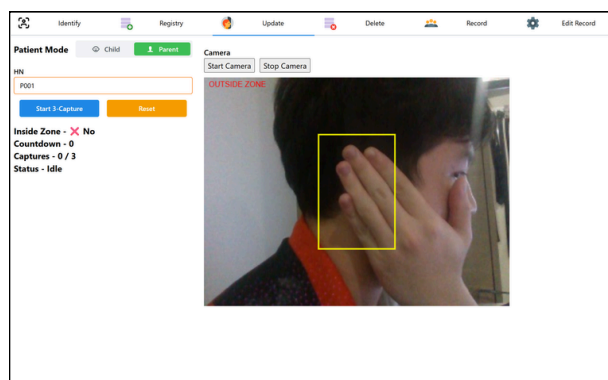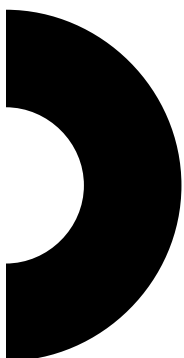


บดบังใบหู

Tutorial


Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย


ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Start 3-Capture เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
หลักการถ่ายภาพ

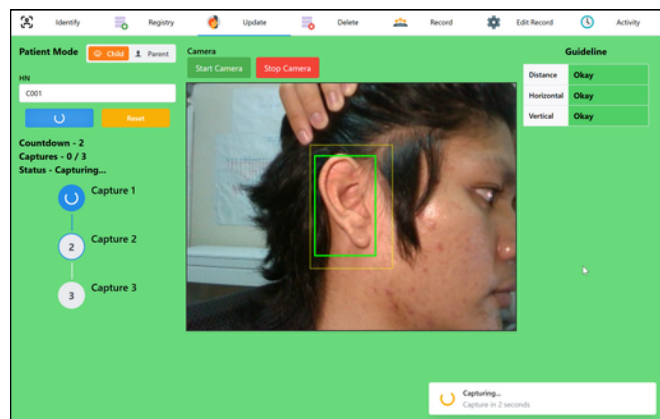



ให้ ใบหู (กรอบสีเขียว) อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านขวาบน
เมื่อไม่สามารถทำตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

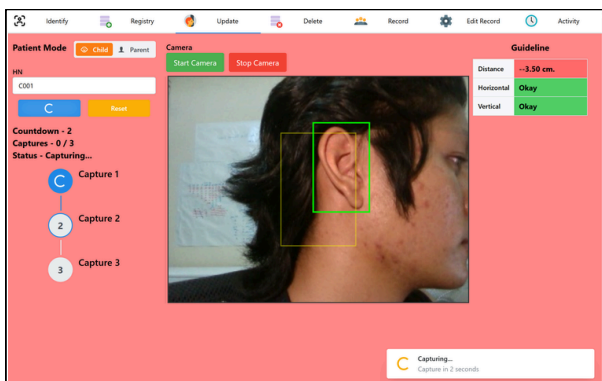

Distance - ใกล้/ไกลเกินไป

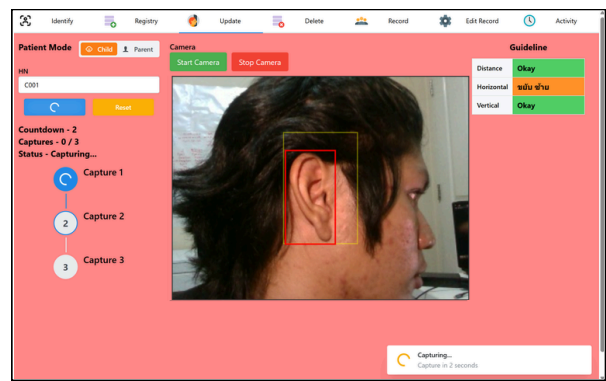

Horizontal - เอียง ซ้าย/ขวา เกินไป

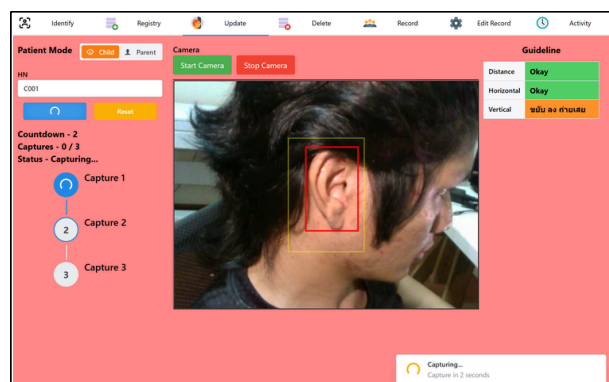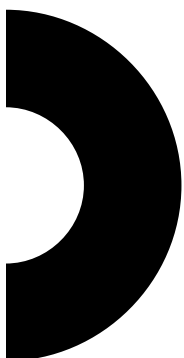


Vertical - เงย/เสย เกินไป

Tutorial


Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Start 3-Capture เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
ภาพที่ 1 - ถ่ายด้านตรงของใบหู ครั้งที่ 1

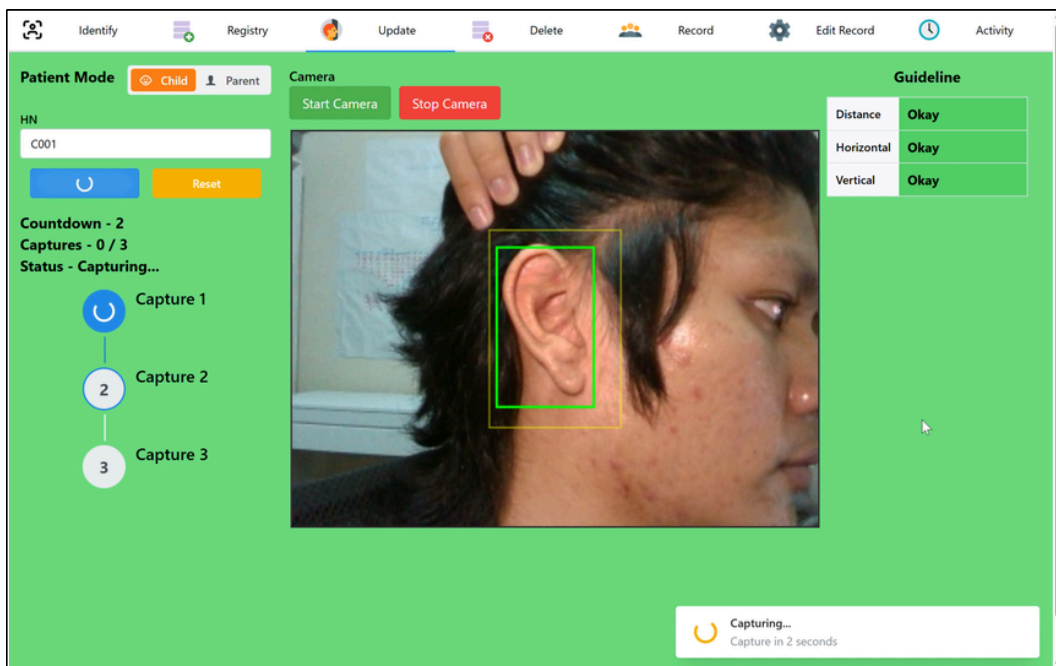

ภาพที่ 2 - ถ่ายด้านตรงของใบหู ครั้งที่ 2

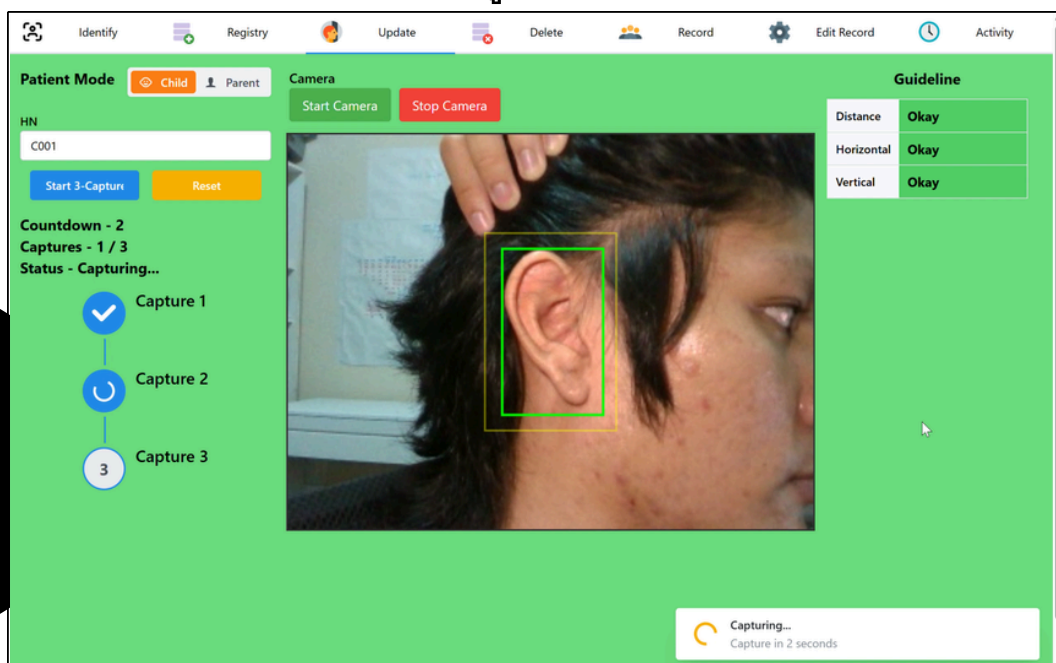


Tutorial


Update

อัปเดต/สแกนใบหูของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Start 3-Capture เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
ภาพที่ 3 - ถ่ายด้านตรงของใบหู ครั้งที่ 3

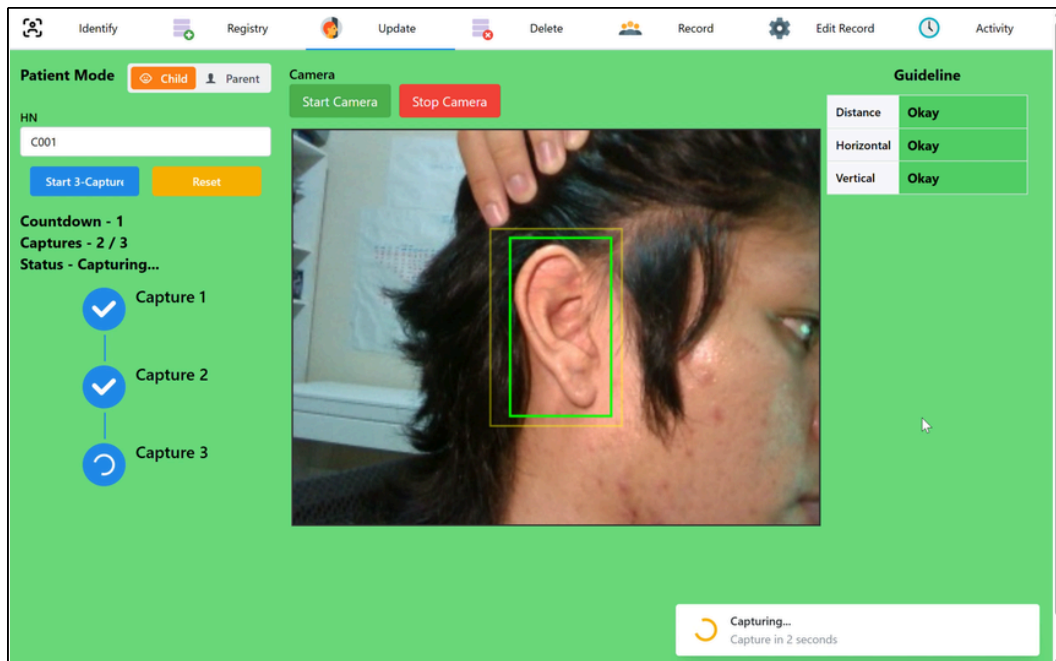

เมื่อถ่ายครบ 3 ภาพสำเร็จแล้ว จะแสดงแจ้งเตือนว่า succes

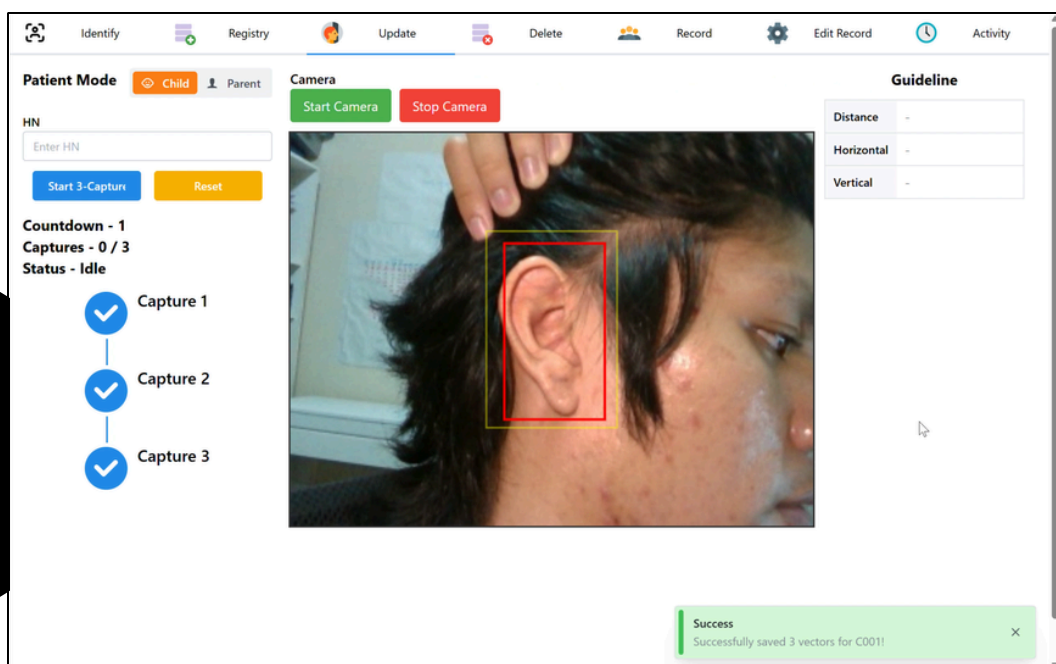

Tutorial

Delete

ลบประวัติไม่ต้องการใช้แล้ว/ลบความสัมพันธ์ผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Delete - Delete

เปลี่ยนโหมด ลบประวัติ/ลบความสัมพันธ์

เปลี่ยนโหมด Child/Parent

ยืนยันการลบประวัติ


หมายเลขผู้ป่วย

Tutorial

Delete


ลบประวัติไม่ต้องการใช้แล้ว/ลบความสัมพันธ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมดผู้ป่วย

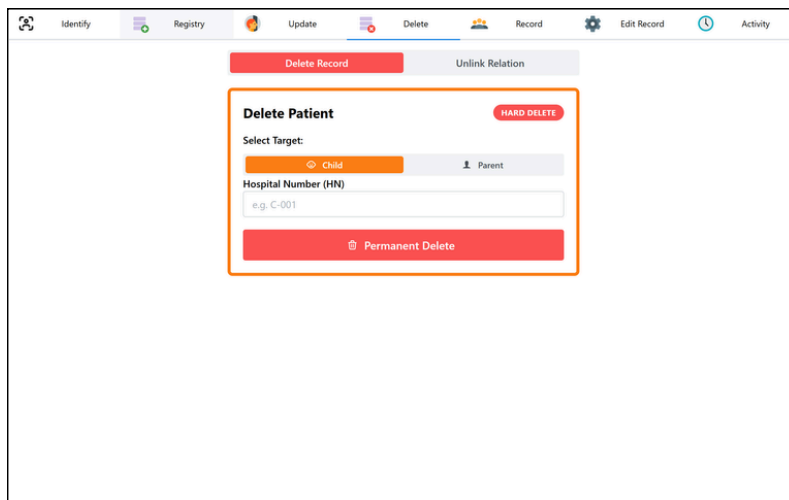

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing icons and labels for Identify, Registry, Update, Delete, Record, Edit Record, and Activity. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Delete Record' (active) and 'Unlink Relation'. The main content area displays a 'Delete Patient' dialog box. Inside the dialog, there is a 'Select Target:' section with two radio buttons: 'Child' (selected) and 'Parent'. Below this is a text input field for 'Hospital Number (HN)' with the placeholder text 'e.g. C-001'. At the bottom of the dialog is a red button labeled 'Permanent Delete'. A red box highlights the 'Child' radio button and the 'Permanent Delete' button.

โหมด: Child

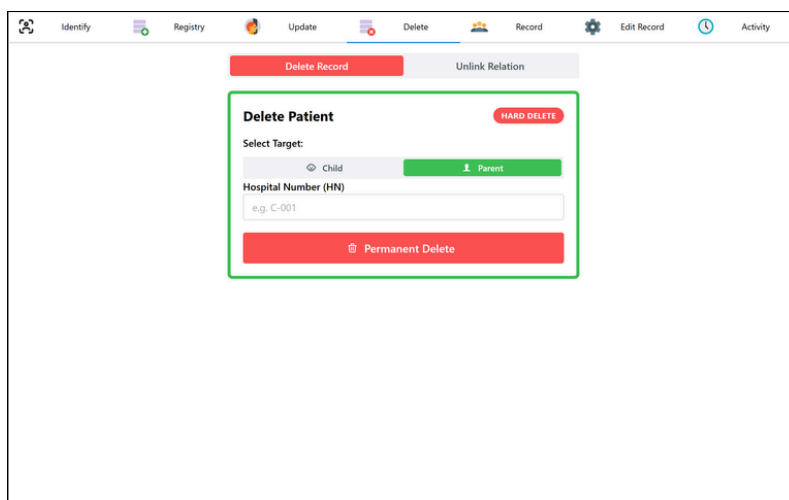

The screenshot shows the same web application interface as the previous one. In this instance, the 'Parent' radio button under 'Select Target:' is selected. The 'Hospital Number (HN)' input field and the 'Permanent Delete' button remain the same. A green box highlights the 'Parent' radio button and the 'Permanent Delete' button.


โหมด: Parent

Tutorial


Delete

ลบประวัติไม่ต้องการใช้แล้ว/ลบความสัมพันธ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 2 กรอก HN ที่ต้องการลบประวัติ

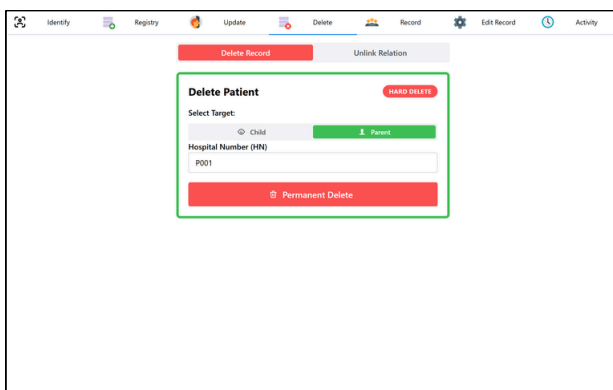

กรอก HN ที่ต้องการลบประวัติ

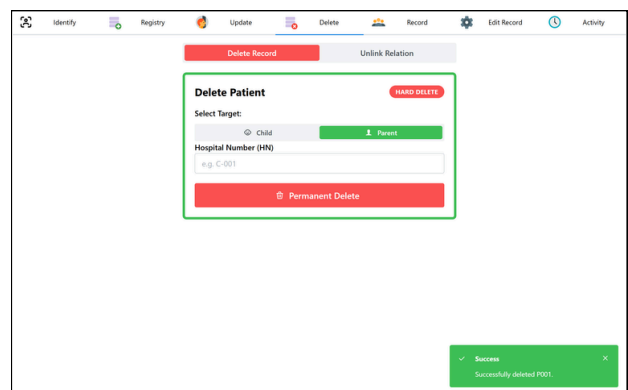

กด 'Submit' เพื่อยืนยันการลบประวัติ
ขวาล่าง - แสดงการการลบประวัติเสร็จสิ้น

Before


HN	HN-Child	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
P001	C001	P	Ohm		Thai	M	14 Dec 2005	Thailand						Good boy	✗

ข้อมูลก่อนลบประวัติ

After

HN	HN-Child	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
No data															

ข้อมูลหลังลบประวัติ

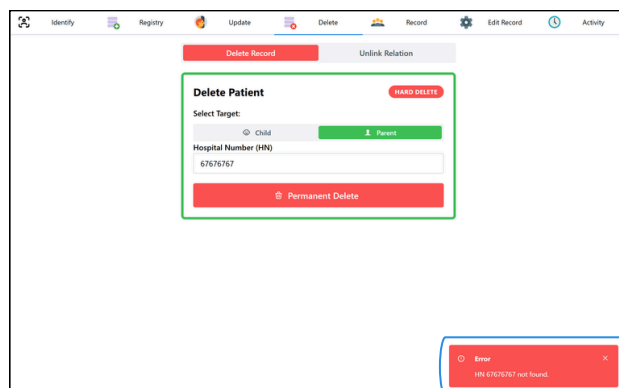

Error

ค้นหา HN ไม่เจอ
ในฐานะข้อมูลแสดงผล

Tutorial

Delete

ลบประวัติไม่ต้องการใช้แล้ว/ลบความสัมพันธ์ผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Delete - Unlink Relation

เปลี่ยนโหมด ลบประวัติ/ลบความสัมพันธ์

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing icons and labels for 'Identify', 'Registry', 'Update', 'Delete', 'Record', 'Edit Record', and 'Activity'. The 'Delete' tab is active, and a sub-menu is open showing 'Delete Record' and 'Unlink Relation'. The 'Unlink Relation' option is selected, opening a modal window titled 'Unlink Relation' with a 'RELATION' label. Inside the modal, there is a text box explaining that the link between a parent and child will be removed, but records will not be deleted. Below this, there are two input fields: 'Child HN' with the example 'e.g. C-001' and 'Parent HN' with the example 'e.g. P-001'. At the bottom of the modal is a purple button labeled 'Unlink Relation'. Four blue lines with dots point to specific elements: one points to the 'Delete' tab, another to the 'Unlink Relation' button in the modal, a third to the 'Child HN' input field, and a fourth to the 'Parent HN' input field.

หมายเลข
ผู้ป่วย Parent

ยืนยันยกเลิกการเชื่อม



หมายเลขผู้ป่วย Child

Tutorial

Delete

ลบประวัติไม่ต้องการใช้แล้ว/ลบความสัมพันธ์ผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 กรอก HN ที่ต้องการลบประวัติ

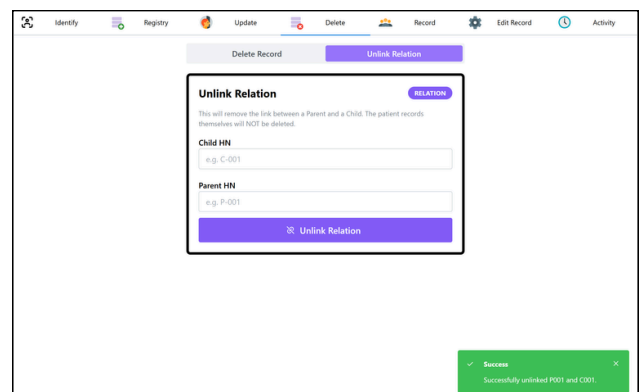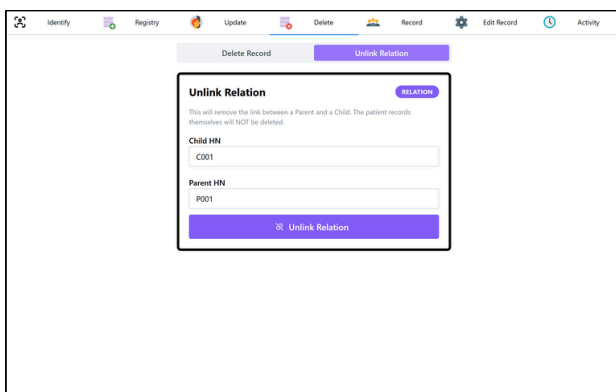

กรอก HN 2 เลขที่ต้องการยกเลิกการเชื่อม

กด 'Unlink Relation' เพื่อยืนยันยกเลิกการเชื่อม
ขวาล่าง - แสดงการยกเลิกการเชื่อมสำเร็จ

Before


HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
C001	P001	Pitak				M	-								✓

ข้อมูลก่อนลบประวัติ

After

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
C001	No Parent	Pitak				M	-								✓

ข้อมูลหลังลบประวัติ

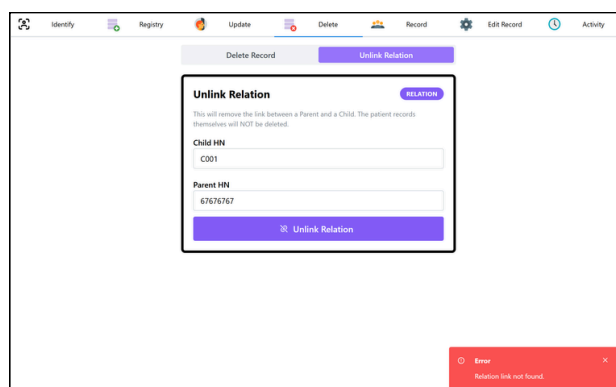

Error

ค้นหา HN ไม่เจอ
ในฐานะข้อมูลแสดงผล

Tutorial

Record

เรียกดู/ค้นหาประวัติผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Record

ฟิลเตอร์ค้นหา ชื่อจริง สัญชาติ น้ำหนักตอนเกิด

หมายเลขผู้ป่วย อายุ เพศ น้ำหนักตอนนี้

ส่วนสูง

ความสมบูรณ์

รีเซ็ต

หมายเลขผู้ป่วยคู่สัมพันธ์

วัน/เดือน/ปีเกิด

ที่อยู่

รายละเอียดการเกิด

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integ
karn	No Parent	karn	karn	karn	karn	M	03 Feb 2026						
6819/66	No Parent	karn pichaya	inta	2y10m	0	F	07 Feb 2026						
22329/66	No Parent	kittapat	2m	0		M	06 Feb 2026						
25928/67	No Parent	metat	1y5m	0		M	31 Jan 2026						
C001	P001	Pitak				M	-						
3234/69	No Parent	saipopo linn	1y 7 m	0		M	30 Jan 2026						

Tutorial

Record

เรียกดู/ค้นหาประวัติผู้ป่วย

ค่าเริ่มต้น ตารางจะแสดงประวัติทั้งหมดในฐานข้อมูล

The screenshot shows a web application interface for managing patient records. The top navigation bar includes icons and labels for Identify, Registry, Update, Delete, Record (active), Edit Record, and Activity. On the left, a search sidebar is visible with fields for Hospital Number, First Name, and Last name, along with a 'Reset' button. The main area displays a table titled 'Child' with 13 columns: HN, HN-Parent, First Name, Last Name, Age, Nationality, Sex, DOB, Address, Born Detail, Born Weight, Now Weight, Height, and Integ. The table contains 6 records, with the first five having birth dates in 2026. The interface also shows 'found: 61 records' and 'checked vector: 53 records'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integ
karn	No Parent	karn	karn	karn	karn	M	03 Feb 2026						
6819/66	No Parent	karn pichaya	inta	2y10m	0	F	07 Feb 2026						
22329/66	No Parent	kittapat	2m	0		M	06 Feb 2026						
25928/67	No Parent	metat	1y5m	0		M	31 Jan 2026						
C001	P001	Pitak				M	-						
3234/69	No Parent	saipopo linn	1y 7 m	0		M	30 Jan 2026						

เมื่อกดปุ่มรีเซ็ต ค่าค้นหาจะถูกลบและตารางจะแสดงค่าเริ่มต้น

กดปุ่ม Show เพื่อค้นหา

Tutorial

Record

เรียกดู/ค้นหาประวัติผู้ป่วย

การค้นหาข้อมูล

1. การค้นหาแบบด้วยข้อมูล 1 ตัว

The screenshot shows a web application interface for searching child records. On the left is a 'Search' sidebar with fields for 'Hospital Number' (containing 'kam'), 'First Name', and 'Last name'. The main area displays a table titled 'Child' with columns: HN, HN-Parent, First Name, Last Name, Age, Nationality, Sex, DOB, Address, Born Detail, Born Weight, Now Weight, Height, Integrity, Data, and Vector. A single record is shown with a red 'X' in the Vector column. The status bar at the top right indicates 'found: 1 record' and 'checked vector: 0 record'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
kam	No Parent	kam	kam	kam	kam	M	03 Feb 2026								X

This screenshot shows the same search interface but with two records found. The 'First Name' field in the search sidebar is now empty. The table displays two records. The status bar indicates 'found: 2 records' and 'checked vector: 1 record'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
kam	No Parent	kam	kam	kam	kam	M	03 Feb 2026								
6819/66	No Parent	kam	pachaya inta	2y10m	0	F	07 Feb 2026								

This screenshot shows the search interface with the 'Last name' field filled with 'kam'. It displays one record with a red 'X' in the Vector column. The status bar indicates 'found: 1 record' and 'checked vector: 0 record'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
kam	No Parent	kam	kam	kam	kam	M	03 Feb 2026								X

Tutorial

Record

เรียกดู/ค้นหาประวัติผู้ป่วย

การค้นหาข้อมูล

2. การค้นหาแบบด้วยข้อมูล 2 ตัว

The screenshot shows the 'Record' tab in a medical system. On the left is a 'Search' panel with a dropdown menu set to 'Child'. Below it are input fields for 'Hospital Number', 'First Name', and 'Last name', each containing the text 'karn'. A 'Reset' button is at the bottom of the search panel. The main area displays a table titled 'Child' with the following columns: HN, HN-Parent, First Name, Last Name, Age, Nationality, Sex, DOB, Address, Born Detail, Born Weight, Now Weight, Height, Integrity, Data, and Vector. The table shows one record with the following data: HN: karn, HN-Parent: No Parent, First Name: karn, Last Name: karn, Age: karn, Nationality: karn, Sex: M, DOB: 03 Feb 2026, Address: , Born Detail: , Born Weight: , Now Weight: , Height: , Integrity: , Data: , and Vector: x. Above the table, it says 'found: 1 record' and 'checked vector: 0 record'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
karn	No Parent	karn	karn	karn	karn	M	03 Feb 2026								x

3. การค้นหาแบบด้วยข้อมูล 3 ตัว

The screenshot shows the 'Record' tab in a medical system. On the left is a 'Search' panel with a dropdown menu set to 'Child'. Below it are input fields for 'Hospital Number', 'First Name', and 'Last name', each containing the text 'karn'. A 'Reset' button is at the bottom of the search panel. The main area displays a table titled 'Child' with the following columns: HN, HN-Parent, First Name, Last Name, Age, Nationality, Sex, DOB, Address, Born Detail, Born Weight, Now Weight, Height, Integrity, Data, and Vector. The table shows one record with the following data: HN: karn, HN-Parent: No Parent, First Name: karn, Last Name: karn, Age: karn, Nationality: karn, Sex: M, DOB: 03 Feb 2026, Address: , Born Detail: , Born Weight: , Now Weight: , Height: , Integrity: , Data: , and Vector: x. Above the table, it says 'found: 1 record' and 'checked vector: 0 record'.

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
karn	No Parent	karn	karn	karn	karn	M	03 Feb 2026								x

Tutorial

Record

เรียกดู/ค้นหาประวัติผู้ป่วย

การค้นหาข้อมูล

แสดง error เมื่อหาข้อมูลไม่เจอในฐานข้อมูล

Search

Child Parent

Hospital Number
67676767

First Name
karn

Last name
karn

Reset

Child

found: 0 record checked vector: 0 record

HN	HN-Parent	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
No data															


Error!
No matched data. Please, try again!

Tutorial

Edit Record

แก้ไขประวัติผู้ป่วย

องค์ประกอบของหน้า Edit Record

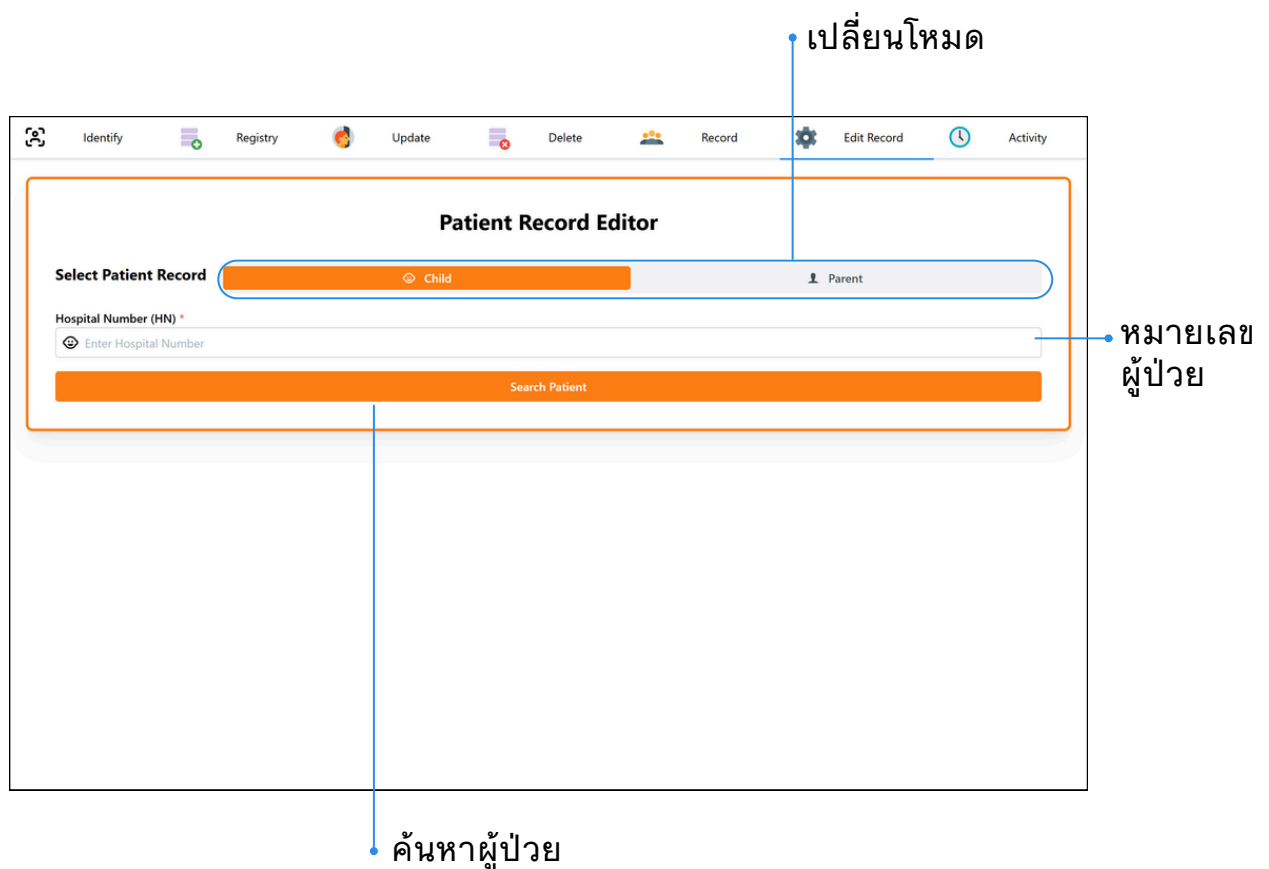


Tutorial

Edit Record


แก้ไขประวัติผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโหมดผู้ป่วย

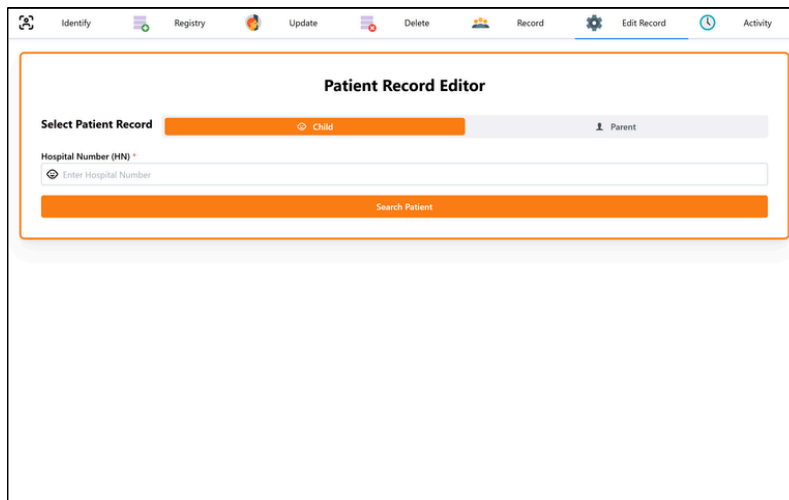

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' window. At the top, there is a navigation bar with icons for Identify, Registry, Update, Delete, Record, Edit Record (active), and Activity. Below the navigation bar, the 'Select Patient Record' section has two tabs: 'Child' (selected, highlighted in orange) and 'Parent'. Under the 'Child' tab, there is a text input field labeled 'Hospital Number (HN)' with a placeholder 'Enter Hospital Number'. Below the input field is an orange button labeled 'Search Patient'.

โหมด: Child

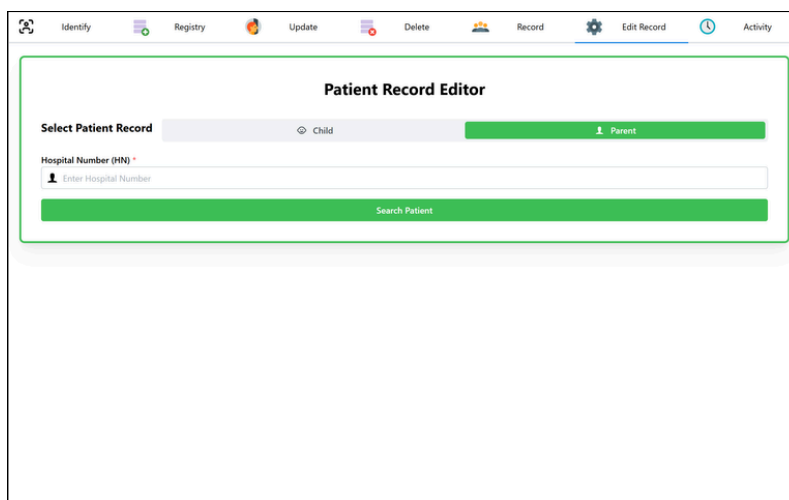

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' window. At the top, there is a navigation bar with icons for Identify, Registry, Update, Delete, Record, Edit Record (active), and Activity. Below the navigation bar, the 'Select Patient Record' section has two tabs: 'Child' and 'Parent' (selected, highlighted in green). Under the 'Parent' tab, there is a text input field labeled 'Hospital Number (HN)' with a placeholder 'Enter Hospital Number'. Below the input field is a green button labeled 'Search Patient'.


โหมด: Parent

Tutorial

Edit Record

แก้ไขประวัติผู้ป่วย


ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลข HN

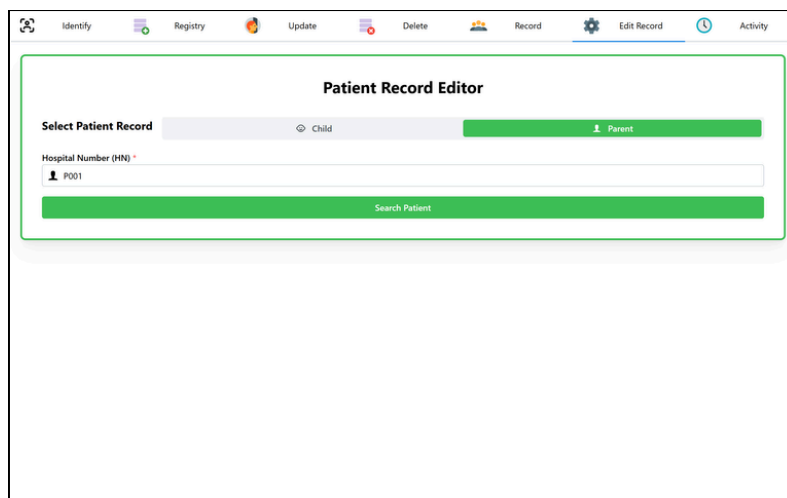

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' window. At the top, there is a navigation bar with icons for Identify, Registry, Update, Delete, Record, Edit Record (active), and Activity. Below the navigation bar, the 'Select Patient Record' section is visible. It has two tabs: 'Child' and 'Parent'. The 'Hospital Number (HN)' field is populated with 'P001'. A green 'Search Patient' button is located at the bottom of the search section.

กรอก HN และกด 'Search Patient' เพื่อค้นหาและแก้ไข

Error

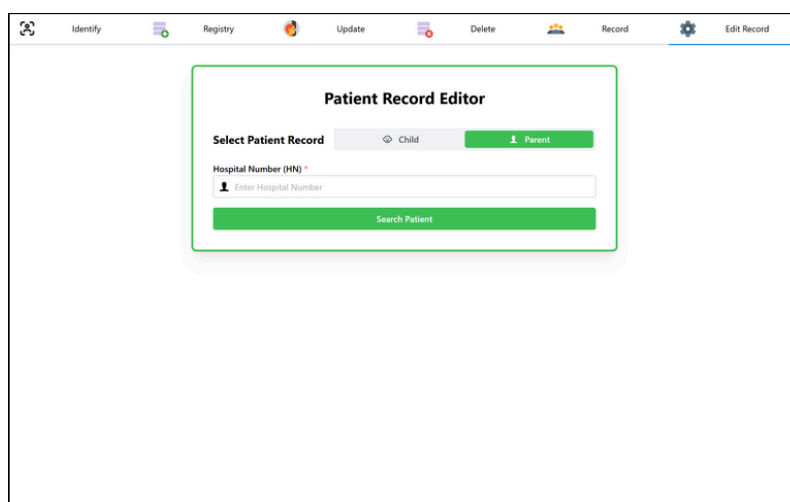

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' window with an error message. The 'Hospital Number (HN)' field is empty and has a red asterisk. Below the field, there is a red error message: 'Enter Hospital Number'. The 'Search Patient' button is still visible at the bottom of the search section.

Error: ค้นหา HN ไม่เจอในฐานข้อมูลแสดงผล Error

Tutorial

Edit Record

แก้ไขประวัติผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขข้อมูลที่ต้องการต่อผู้ป่วยนั้น

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' form. The 'Hospital Number' is P001. The 'First name' is Ohm, 'Last name' is Ohm, 'Age' is 20, and 'Date of Birth' is 14 Dec 2005. The 'Sex' is Male, 'Nationality' is Thai, and 'Address' is Thailand. The 'Born Detail' is 'Enter born detail', 'Born Weight (kg)' is 'Enter born weight', 'Now Weight (kg)' is 'Enter now weight', and 'Height (cm)' is 'Enter height'. The 'Integrity' is 'Enter integrity' and the 'Note' is 'Enter note'. There are 'Back' and 'Save Changes' buttons at the bottom.

แก้ไขข้อมูลที่ต้องการต่อผู้ป่วยนั้น

The screenshot shows the 'Patient Record Editor' form after saving changes. The 'Hospital Number' is P001. The 'First name' is P, 'Last name' is Ohm, 'Age' is 20, and 'Date of Birth' is 14 Dec 2005. The 'Sex' is Male, 'Nationality' is Thai, and 'Address' is Thailand. The 'Born Detail' is 'Enter born detail', 'Born Weight (kg)' is 'Enter born weight', 'Now Weight (kg)' is 'Enter now weight', and 'Height (cm)' is 'Enter height'. The 'Integrity' is 'Enter integrity' and the 'Note' is 'Good boy'. There are 'Back' and 'Save Changes' buttons at the bottom. A green success message at the bottom right says 'Success! Record is updated successfully.'

กด 'Save Chages' เพื่อบันทึกการแก้ไข
ขวาล่าง - แสดงบันทึกการแก้ไขสำเร็จ

Before

HN	HN-Child	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
P001	C001	Ohm				M	-								×

ข้อมูลก่อนการแก้ไข

After

HN	HN-Child	First Name	Last Name	Age	Nationality	Sex	DOB	Address	Born Detail	Born Weight	Now Weight	Height	Integrity	Data	Vector
P001	C001	P	Ohm		Thai	M	14 Dec 2005	Thailand						Good boy	×

ข้อมูลหลังการแก้ไข

Tutorial

Activity

กิจกรรม/ความเคลื่อนไหวของโปรแกรมและข้อมูล

username ที่ต้องการกรอง

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

Search

Username

Enter username

Order by

Descending Ascending

Category

☐ Login

☐ Identify

☐ Register

☐ Update

☐ Delete

Reset

Activity

Wed 25 Feb 2026 - 05:53:02 - [admin] Operator admin Logged In

Wed 25 Feb 2026 - 05:40:32 - [admin] Updated Info for Parent HN: P001

Wed 25 Feb 2026 - 05:05:59 - [admin] Updated Vectors for Child HN: C001

Wed 25 Feb 2026 - 04:54:06 - [admin] Registered Child HN: C001

Wed 25 Feb 2026 - 04:52:00 - [admin] Hard Deleted Child HN: C001

Wed 25 Feb 2026 - 04:45:41 - [admin] Registered Parent HN: P001

Wed 25 Feb 2026 - 04:43:23 - [admin] Registered Child HN: C001

Wed 25 Feb 2026 - 04:37:52 - [admin] Hard Deleted Parent HN: P001

Wed 25 Feb 2026 - 04:37:45 - [admin] Hard Deleted Child HN: C001

Wed 25 Feb 2026 - 04:32:33 - [admin] Operator admin Logged In

Wed 25 Feb 2026 - 04:27:58 - [admin] Operator admin Logged In

Tue 24 Feb 2026 - 21:29:52 - [admin] Operator admin Logged In

Tue 24 Feb 2026 - 21:08:34 - [admin] Unlinked Parent P001 and Child C001

Tue 24 Feb 2026 - 21:06:29 - [admin] Registered Child HN: C001

Tue 24 Feb 2026 - 21:03:47 - [admin] Registered Parent HN: P001

รีเซ็ตตัวกรอง

ประเภทความเคลื่อนไหว

เรียงตาม เก่าไปใหม่/ใหม่ไปเก่า

Troubleshooting



ปัญหาที่พบบ่อย

1. ถ้า USB กล้องหลุด

- ต่อ USB ใหม่และรอสักครู่ แนะนำให้ปิดและเปิดโปรแกรมใหม่

2. กล้องไม่ทำงาน


- ต่อ USB ใหม่ และปิด/เปิดโปรแกรมใหม่

3. identify ผู้ป่วยและข้อมูลที่ได้ ไม่ตรงกับผู้ป่วย

- Update ใบหูของผู้ป่วยใหม่ ให้ใบหู (กรอบสีเขียว)
เต็มพื้นที่กรอบสีเขียว และปฏิบัติตามคำแนะนำ

4. ไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้

- ปิด/เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

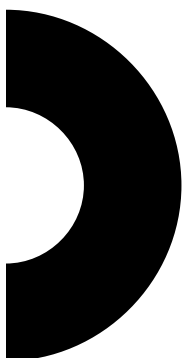

ติดต่อผู้พัฒนา

Email: earproject_kmutnb@outlook.com